

FRANKENMAN *Transcut*

SINGLE USE TRANSVERSE CUTTING LINEAR STAPLER



FRANKENMAN



Fortschrittliche Medizintechnik
Verantwortungsvoll umgesetzt


Der Transcut™ Stapler ist eine einzigartige Ergänzung des Frankenman-Portfolios.

- f** Das Frankenman Transcut-System setzt vier Reihen paralleler Klammern und trennt das Gewebe dazwischen.
- f** Die Transcut-Produktreihe ist die umfassendste auf dem Markt, mit 40 mm und 60 mm Instrumenten, jeweils erhältlich in Blau und Grün.



Auslösemechanismus

- f** Der Frankenman Transcut™ ist der einzige Stapler für transverses Schneiden auf dem Markt mit einem einzigartigen Zwei-Stufen-Auslösemechanismus.
- f** Schritt 1: Die Klammern werden zuerst vorgeschoben und geschlossen.
- f** Schritt 2: Das Gewebe wird zwischen den Klammerlinien durchtrennt.
- f** Dies reduziert nicht nur den erforderlichen Kraftaufwand beim Auslösen, sondern stellt auch sicher, dass das Gewebe erst nach dem Schließen der Klammern durchtrennt wird.

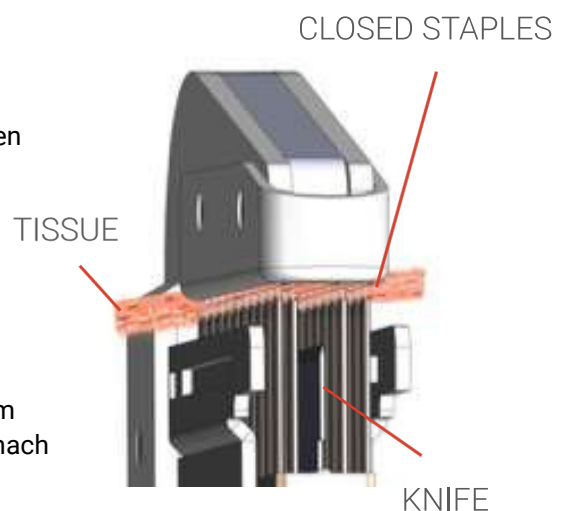


- f** Das Schließen, Auslösen und Öffnen des Instruments kann mit nur einer Hand durchgeführt werden.



-  1. Der Transcut kann bei tiefen Rektumkarzinom-Resektionen einen zusätzlichen Sicherheitsabstand von 10 mm ermöglichen.



-  2. Der schlankere Kopf ermöglicht eine verbesserte Sicht in anterioren und posterioren Ebenen.

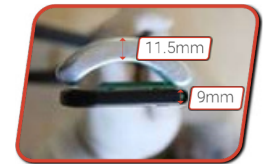

-  3. Die große Instrumentenlänge (43,5 cm) ermöglicht einen besseren Zugang zum Becken und zu schwer erreichbaren Bereichen.



-  Größere Maulöffnung als bei vergleichbaren Produkten. Für eine bessere Aufnahme und Positionierung des Gewebes

i) 19mm (Fully Open)

ii) 10.5mm (Intermediate)

-  Der Remote Tissue Retaining Pin ermöglicht eine präzise Positionierung des Gewebes vor dem Auslösen.

-  Zwischenverriegelungsposition mit hörbarem Feedback

Ermöglicht die Kontrolle einer sicheren Positionierung des Gewebes innerhalb der Branchen vor dem Auslösen.



Der Safety-Lockout-Mechanismus verhindert unbeabsichtigte Verletzungen nach dem Auslösen des Instruments, indem er die Schließ- und Auslösemechanismen blockiert.

CODE		CLOSED STAPLE HEIGHT	OPEN STAPLE HEIGHT	STAPLE CROWN	NO. OF STAPLE ROWS	STAPLE QUANTITY	PER BOX
TCLS40B	●	1.5MM	3.8MM	3.0MM	4	39	3
TCLS40G	●	2.0MM	4.5MM	3.0MM	4	39	
TCLS60B	●	1.5MM	3.8MM	3.0MM	4	39	
TCLS60G	●	2.0MM	4.5MM	3.0MM	4	39	