

Bestelldetails

Artikelnr.	Äußerer Durchmesser	Größe Lumen	Volumen*	Klammeranzahl	Geschlossene Höhe	Offene Höhe	Klammerkronen	Klammerreihen	Verpackungseinheit
CPH-32	32,5 mm	24 mm	17,17 cm ³	32	0,75-1,5 mm	4,2 mm	3,8 mm	2	3
CPH-34	34,5 mm	26 mm	21,61 cm ³	32	0,75-1,5 mm	4,2 mm	3,8 mm	2	3
CPH-34HV	34,5 mm	26 mm	22,97 cm ³	32	0,75-1,5 mm	4,2 mm	3,8 mm	2	3
CPH-36SMS	36,5 mm	28 mm	33,30 cm ³	36	0,75-1,5 mm	4,2 mm	3,8 mm	2	3

*Die Gehäusevolumina gehören damit zu den größten auf dem Markt.

Weitere Informationen und Bestellungen:

FRANKENMAN
GmbH

Wittland 2-4 | D-24109 Kiel

Tel.: 0431-3209730-0

Fax: 0431-3209730-29

Mail: info@frankenman.de

www.frankenman.de

Qualitätskontrolle

Höchsten Qualitätsanforderungen zu entsprechen, ist unsere Maxime. Im Ergebnis können wir mit Stolz auf die geringste Reklamationsrate unserer Industrie verweisen. Darüber hinaus gelten unsere Prozesse zur kontinuierlichen Qualitätsverbesserung als führend.



AUCH ERHÄLTlich BEI FRANKENMAN



FRANKENMAN CPH Portfolio

Zirkuläre Stapler für rektalen Prolaps und Hämorrhoiden



FRANKENMAN

Größte Variantenvielfalt für
indikationsoptimierte Versorgung

Vorteile und Eigenschaften

Bei der chirurgischen Behandlung von Hämorrhoiden- speziell in Kombination mit ODS (Obstructed Defecation Syndrome) - ist die Korrektur eines internen rektalen Prolapses das Hauptziel.

Mit der CPH- Produktlinie hat Frankenman als erster Hersteller Klammernahtinstrumente speziell für die Behandlung von Hämorrhoiden entwickelt, da herkömmliche Stapler bei Prolaps- Korrekturen keine zufriedenstellenden Ergebnisse erzielt haben.


Die Frankenman CPH-34HV und CPH-36SMS sind die ersten Instrumente, bei denen das Volumen des Klammernahtgehäuses maximiert und gleichzeitig die sonstigen Eigenschaften des Instruments beibehalten wurden. Wissenschaftlich und klinisch getestet - CPH ist das effektivste Instrument für die Hämorrhoidopexie.

Zubehör

Es werden 2 Anal-Dilatatoren geliefert: Ergänzend zum Standard-Dilatator soll ein "Butterfly" Dilatator bei schwierigem Zugang unterstützen.


Jedes CK Kit enthält die folgenden Komponenten:

- a) 1x Fadenfänger
- b) 1x Analdilatator „Butterfly“
- c) 1x Analdilatator kreisförmig „Universal“
- d) 1x Analdilatator
- e) 1x transparentes Anoskop mit Zentimetermarkierung

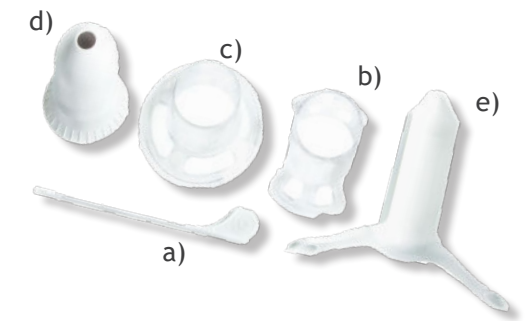

CPH

erhältlich in 2 Größen:
CPH 32 mit 17,17 cm³ Gehäusevolumen
CPH 34 mit 21,60 cm³ Gehäusevolumen

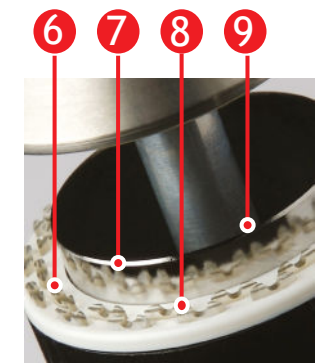

CPH-36SMS

Der CPH36SMS ist die jüngste Innovation der CPH-Produktlinie.

Dieses Klammernahtinstrument wurde speziell für das STARR-Verfahren (Stapled Transanal Rectal Resection) entwickelt.

Vorteile und Eigenschaften

- Maximales Gehäusevolumen (33,30 cm³) im Vergleich zu gängigen Instrumenten
- 36 Titanklammern und rundum befestigte Klinge für optimale Blutstillung
- 4 vergrößerte Nahtfenster für bessere Visualisierung
- Variable Kompression des Gewebes von 0,75mm - 1,5mm



CPH-34HV

