

Weitere Informationen und Bestellungen:



Balgheimer Str. 42
78549 Spaichingen
Tel.: 07424 98100-0
Mail: info@frankenman.de
www.frankenman.de



Frankenman bietet über die Frankenman- eigene Academy zahlreiche Weiterbildungskurse in verschiedenen chirurgischen Bereichen mit weltweit anerkannten Experten als Instruktoren an. Diese Kurse sind so konzipiert, dass sie sowohl theoretische Aspekte als auch Workshops mit praktischen Übungen umfassen.

Qualitätskontrolle

Höchsten Qualitätsanforderungen zu entsprechen ist unsere Maxime. Im Ergebnis können wir mit Stolz auf die geringste Reklamationsrate unserer Industrie verweisen. Darüber hinaus gelten unsere Prozesse zur kontinuierlichen Qualitätsverbesserung als führend.



FRANKENMAN Linear Cutter Stapler



DURCHDACHTES DESIGN, OPTIMIERTE ERGONOMIE UND
ZUVERLÄSSIGE FUNKTION

Instrumente, die den Ansprüchen der modernen Chirurgie gerecht werden.

Die linearen, nachladbaren Klammernahtinstrumente von Frankenman überzeugen durch hohe Verlässlichkeit und Funktionalität. Sie wurden entwickelt, um eine präzise Geweberesektion und eine verlässliche Klammerformung zu gewährleisten.

Vorteile und Eigenschaften

- Cam Gear Design: fördert eine gleichmäßige Klammerformung und kann das Blutungsrisiko reduzieren.
- Sicherheitsverschluss bei leerem Magazin
 - Die Klinge lässt sich nur mit vollem Magazin aktivieren
- Nachladbar - farbcodierte Ladeeinheiten
- Instrumente werden direkt mit einem Magazin geladen geliefert

1

Pin zur Fixierung des Gewebes

2

Deutlich sichtbare Skala auf beiden Seiten des Gehäuses

3

Nachladbare Magazine mit Sicherheitsmechanismus
→ verhindern das Auslösen eines leeren Magazins

4

Einzigartige Sicherheitsverriegelung
→ verhindert ein frühzeitiges Auslösen während der Vorbereitung



7

Vereinfachter Wechsel der Ladeeinheit durch
a)komplette Trennbarkeit der Instrumentenschenkel
b)überstehende Haltepins des Magazins

6

Einzigartige rechtwinklige Gewebegrenze, um Ziehhamonika-Effekt und Schneiden vor Klammerbeginn zu vermeiden


5

Modernes, ergonomisches Design von → bekannten britischen Industriedesignern

1



6

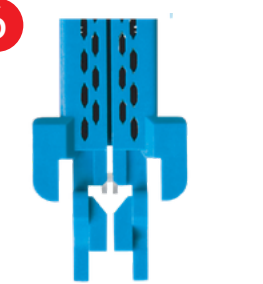

5



7a)



7b)



Bestelldetails

Artikelnr. Instrument	Artikelnr. Nachladeeinheit	Geschlossene Höhe	Offene Höhe	Klammer-anzahl	Reihen-länge	Klammer-kronen	Klammer-reihen
LC-60B	LCR-60B	1,5 mm	3,8 mm	60	61 mm	3 mm	4
LC-60G	LCR-60G	2,0 mm	4,5 mm	60	61 mm	3 mm	4
LC-80B	LCR-80B	1,5 mm	3,8 mm	80	81 mm	3 mm	4
LC-80G	LCR-80G	2,0 mm	4,5 mm	80	81 mm	3 mm	4